



Большие паровые стерилизаторы PHS

- + РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- + ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- + НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- + ЭФФЕКТИВНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
- РАЗВИТАЯ СЕТЬ СЕРВИСА

Паровые стерилизаторы PHS – это современные паровые стерилизаторы российского производства, созданные на основе кооперации с европейским производителем по программе локализации, полностью соответствуют стандартам РФ, а также международным и европейским стандартам.



- Стерилизаторы PHS предназначены для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, а также растворов.
- (ЦСО) и стерилизационных (автоклавных) в медицинских организациях.
- © Стерилизаторы PHS могут эксплуатироваться в составе аптек, лабораторий, на фармацевтических, ветеринарных предприятиях и в других отраслях промышленности.
- (E) Стерилизаторы PHS оснащены современным, удобным и понятным меню управления, которое упрощает эксплуатацию и исключает риск возникновения ошибок.
- Стерилизаторы PHS поддерживают ряд современных функций: удаленный диспетчерский мониторинг и контроль процесса; архивация параметров пройденных циклов; возможность подключения считывателя штрих-кода; возможность распечатки штрих-кода/QR-кода с информацией о цикле; возможность подключения к внешнему принтеру для распечатки графика зависимости температуры и давления на бумаге формата А4 и другие функции.
- Стерилизаторы PHS оборудованы большим количеством встроенных и свободно-программируемых режимов, позволяющих обеспечить стерилизацию изделий медицинского назначения в температурном диапазоне от 100 до 138°С и временном диапазоне от 0 до 999 минут.
- Стерилизаторы PHS оснащены двумя тестовыми программами: тестом на проверку герметичности камеры и тестом на качество проникновения пара в загрузку и удаление воздуха из стерилизационной камеры.
- [[4]] Стерилизаторы PHS имеют низкое потребление электроэнергии и низкий расход воды.

Более 200 медицинских организаций России и Стран Ближнего Зарубежья успешно эксплуатируют паровые стерилизаторы PHS.

В перечень медицинских организаций, использующих паровые стерилизаторы PHS, входят крупные федеральные, областные учреждения здравоохранения различного профиля, перинатальные центры, родильные дома и прочие организации.

Работа паровых стерилизаторов PHS управляется автоматическим контроллером, а общение «стерилизатор-оператор» осуществляется посредством Цветной графической сенсорной панели.

Интерфейс управления состоит из нескольких экранов, содержащих различную информацию в цифровом, текстовом, графическом и схематическом виде.





Паровые стерилизаторы PHS-400 проходного типа в составе ЦСО (вид со стороны чистой и стерильной зоны)





Паровые стерилизаторы PHS-400 не проходного типа в составе стерилизационного отделения

Паровые стерилизаторы PHS соответствуют требованиям стандартов:

- ГОСТ 31598-2012 (EN 285:1996) Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;
- ГОСТ 12.2.091-2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования;
- ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.

Особенности

- Вертикально-скользящая слайдовая дверь обеспечивает экономию пространства в зоне загрузки/выгрузки стерилизатора
- Стерилизационная камера, паровая рубашка и парогенератор из высококачественной марки нержавеющей стали AISI 316L в соответствии с европейским стандартом и требованиями отечественного законодательства
- Встроенный парогенератор с функцией автоматической очистки от солей и накипи перед запуском оборудования
- খে Высокопроизводительный вакуумный насос
- Полностью автоматическое управление на базе надежного контроллера
- Яркий многоцветный ЖК-экран с дружественным для пользователя интерфейсом с диагональю 7" обеспечивает комфорт эксплуатации
- [🔯] Система экономии потребления воды
- [4] Низкое потребление электроэнергии

- ① Окно подтверждения запуска цикла стерилизации на ЖК-экране для исключения риска ошибочного запуска
- Функция автоматического удаления/установки дверного уплотнителя для облегчения технического обслуживания
- Широкий выбор программ стерилизации, в том числе программы для стерилизации растворов
- Тестовые режимы (Вакуум-тест и тест Бови-Дика)
- Архивация данных параметров стерилизации с возможностью их длительного хранения, переноса на ПК
- Оповещение на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания
- - Встроенный принтер для вывода параметров стерилизации

Дополнительные принадлежности для эксплуатации стерилизаторов PHS:


- Загрузочные тележки
- Стерилизационные тележки с двумя полками
- Стерилизационные корзины
- Воздушный компрессор
- Система водоподготовки

Количество тележек/корзин устанавливается в зависимости от типа исполнения и объема камеры стерилизатора.



Программы стерилизации

- Программа стерилизации термочувствительных упакованных изделий и текстиля
- Программа стерилизации инструментов и принадлежностей, упакованных в комбинированные пакеты из бумаги и пленки
- 3 программы стерилизации материалов, чувствительных к вакууму, а также растворов в соответствующей открытой таре
- Программа стерилизации термочувствительных упакованных резиновых материалов или пластика
- 7 свободных программ для использования по усмотрению оператора
- Тест проверки герметичности стерилизационной камеры
- Тест определения полноты удаления воздуха из стерилизационной камеры

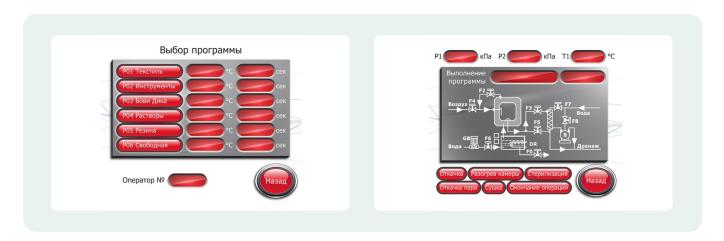

Технические характеристики

Параметр	PHS-300	PHS-400	PHS-600	PHS-800
Кол-во дверей, шт	1/2	1/2	1/2	2
Объем*, л	304	416	547	811
Размер камеры (Д×Ш×В)*, мм	694×662×662	950×662×662	1250×662×662	1850×662×662
Производительность STU**	4	6	8	12
Размер стерилизатора (Д×Ш×В)*, мм	970×1170×1880	1310×1170×1880	1600×1170×1880	2200×1170×1880
Потребляемая мощность*, кВт	42	42	42	58

^{*}Параметры могут отличаться от указанных в рамках утвержденных допусков

^{**}STU – стерилизационная единица (модуль с размерами 300*300*600 мм).

Расходные материалы для паровых стерилизаторов PHS

Материал упаковочный в рулонах для паровой стерилизации DGM Steriguard

- Широкий типоразмерный ряд рулонов, совместимый с любыми типами медицинских изделий
- Лучшее сочетание цена/качество на российском рынке
- Высокая прочность на разрыв и растяжение
- Гарантия асептического вскрытия (отсутствие частиц бумаги и пленки при вскрытии)
- Возможность выбора длины пакета, который нарезается из рулона




Пакеты упаковочные для паровой стерилизации DGM Steriguard под термозапаивающую машину, самозапечатывающиеся (плоские и со складкой)

- Широкий типоразмерный ряд от маленьких до самых больших размеров
- Сокращение времени упаковки (нет необходимости предварительной нарезки)
- Визуально различимо стерилизуемое изделие

Пакеты бумажные для медицинской паровой стерилизации DGM Steriguard

- Изготовлены из белой медицинской бумаги, которая соответствует российским и мировым стандартам
- В ассортименте пакет бумажный плоский самозапечатывающийся, пакет бумажный со складкой, мультипакет плоский
- При более высоком качестве цена пакетов «DGM Steriguard®» – на уровне пакетов из крафт-бумаги

Совместимость всех представленных расходных материалов с паровыми стерилизаторами PHS проверена и подтверждена производителем.

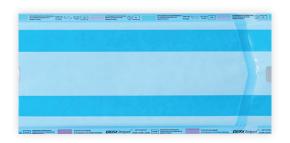



Крепированная бумага для паровой стерилизации DGM Steriguard стандартная, мягкая и усиленная

- Широкий типоразмерный ряд
- Лучшее сочетание цена/качество на российском рынке
- 3 цветовых решения: белый, зеленый, голубой
- Вариант с чередованием листов
- Мягкость на ощупь даже стандартной бумаги

Пакеты плоские усиленные для паровой стерилизации DGM Steriguard

- Предназначены для тяжелых наборов инструментов
- Усиленная прочность на разрыв и растяжение
- Широкий типоразмерный ряд, включая большие размеры

Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации (класс 4) DGM Steriguard

- Многорежимные индикаторы из инновационных чернил: один тип индикатора применим для нескольких режимов стерилизации
- Экономия средств ЛПО по сравнению с закупкой однорежимных индикаторов
- Удобная упаковка в виде твердого конверта с пакетом: защищает от влаги, солнечных лучей, механических повреждений и деформации
- Вскрытие конверта одним движением руки

Индикатор теста Бови-Дик контрольный DGM Steriguard

- Для проверки удаления воздуха из камеры
- Контрольный цикл 134°C 3,5 минут
- Пачка из листов с индикаторным листом в середине
- После стерилизации равномерное изменение цвета индикаторного рисунка















ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Тел/факс: 8 (495) 739-39-45 E-mail: sales@phs-mt.ru